

●骨のセルフチェックに●

Bone Wave

骨ウェーブ

世界初!

手首で測定することを
可能にしました。

早い・簡単・コンパクト




手軽で簡単
約40秒で測定。




手首測定タイプ

■ 機器構成

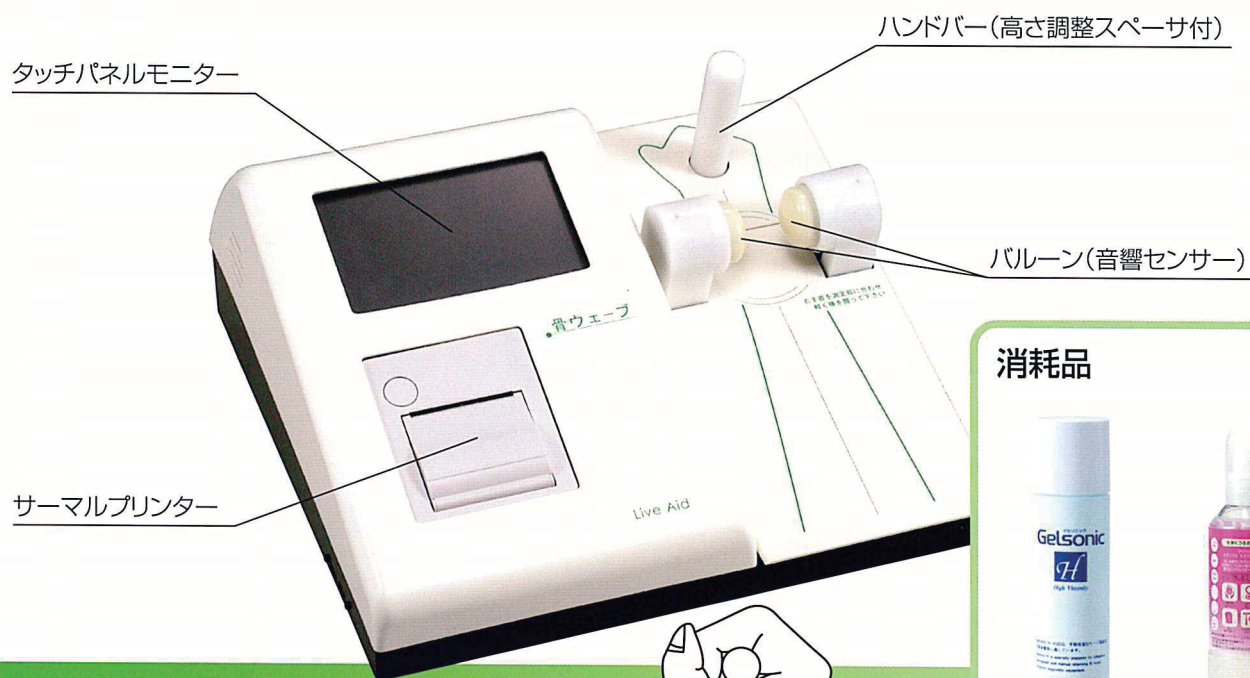

測定原理

測定部位である手首(トウ骨)に音波を伝播させ、透過した波の形から、骨波形指標を算出します。

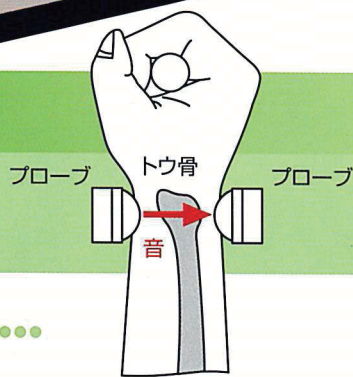


消耗品



音響ゼリー



音響スプレー

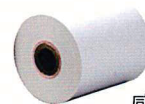

感熱ロール紙

■ 特 徴

- 靴下やストッキングを脱がないで測定ができます。
- 約40秒で骨のセルフチェックができます。
- タッチパネルモニターで簡単に操作ができます。
- ID管理により過去12回の測定データを表示できます。
- 容易に持ち運びができるコンパクト設計です。
- USBポート装備。

■ 仕 様

- 測定部位：手首(トウ骨)
- 表示内容：区分(A～E)、コメント
- 測定時間：約40秒
- 設 置：温度10～35℃、湿度80%以下
- 電 源：AC100V 50/60Hz
- 寸 法：405 W×383L×196H
- 重 量：7.0kg

※コイン仕様もオプションでご用意できます。
 ※商品のデザイン、仕様は改良のため予告無く変更することがありますのでご了承下さい。
 ※印刷物と実際では多少色味が異なる場合があります。あらかじめご了承下さい。
 ※このカタログの記載内容は2015年7月現在のものです。

印刷結果

2007/ 08/18 13:42	測 定 日 時
骨 WAVE 測定結果	測定者データ
あなたは：女性 50歳	
あなたの結果は B	測 定 結 果
コメント： 今の生活習慣を維持して健康に過ごしましょう！ 骨の健康3要素は、カルシウム、日光浴、運動です。	コ メ ント

Live Aid
medicare 24

株式会社 メディケアー

〒244-0003 横浜市戸塚区戸塚町 1545-2
 TEL.045(392)6608 FAX.045(392)6609
 E-mail:rep@medicare24.co.jp
 URL http://www.medicare24.co.jp

販売店: